

TANITA

©2019 TANITA Corporation

Digital Bathroom Scale

Model HD-383

使用說明

1. 規格

負載能力：150 千克 / 330 磅 / 23 英石 8 磅
刻度：0.1 千克 / 0.2 磅 / 1 磅
電池類型：(Fig. 2) AAA x 2

2. 部件 (Fig. 1)

- 主體
- 顯示幕
- 電池 (底部)
- 設定鍵

3. 啟動體重秤 (僅安裝新電池時)

- 裝入電池。
- 將體重計放置在堅固的平地上，確保四個支腳完全著地。
- 顯示 **0000** 後，液晶螢幕將關閉。

4. 量體重

- 使用稱重模式開關，選擇你所喜歡的稱重模式。(底部)
- 請站到體重計上。
- 在幾秒鐘內您的重量將會鎖定，然後閃亮。
- 體重秤將自動關閉。

注意：如果重量超過 150 kg 時，液晶顯示幕將顯示“OL”(超重)，並且在 30 秒以後關閉。測量時，如果出現不規則的顯示，可以通過取出和重裝電池來重啟體重秤。

5. 測量 BMI (身體質量指數) 和過往數值功能

- 設備電源關閉時，按設定鍵打開電源。
- 旋轉設定鍵選擇所需的登記號碼，然後按設定鍵確認。



注意：最多可以存儲 5 人的資料。



- 顯示「height」時，輸入您的身高。
- 注意：身高的範圍在 90cm 至 220cm 之間。



- 按設定鍵後顯示 **0000**。



- 數值自動變為 **00** 後，站到設備上開始量體重。
- 注意：如果數值在 20 秒內沒有變為 **00**，電源將自動關閉。



- 您的體重數值將顯示在顯示螢幕上。體重數值穩定後，液晶螢幕上將顯示穩定標誌 (○)。



注意：如果您中斷測量過程，電源將在 20 秒內自動關閉。

注意：不能測量低於 4kg。



- 2 秒後，將顯示 BMI 數值。



- 旋轉設定鍵顯示過往登記號碼，然後選擇需查看的號碼。




- 按 SET 鍵確認此號碼，將顯示歷史測量資料。
- 注意：再次按設定鍵返回上頁登記號碼選項。
- 注意：按住設定鍵 3 秒後，電源關閉。

6. 更換電池


當液晶屏幕上出現電池電量不足的標誌 (Lo) 時，請取出當前電池並更換新的電池，如圖 2 和 3 所示。

7. 保養說明

- 請小心不要打開體重計或修改它的結構或電路。這些行為將使所有的保修承諾失效。
- 請小心，不要將水或化學液體灑在體重計上。應定期用濕布擦拭清潔體重計。
- 當長時間不使用時，請取出電池，避免損壞體重計。
- 當使用發射頻率類的電子產品 (例如手機) 時，請不要使用這個體重計，因為這樣也許會影響您的測量結果。
- 在潮濕狀態下，請不要踩踏在平台上。
- 不要在平台上擺放任何物體。

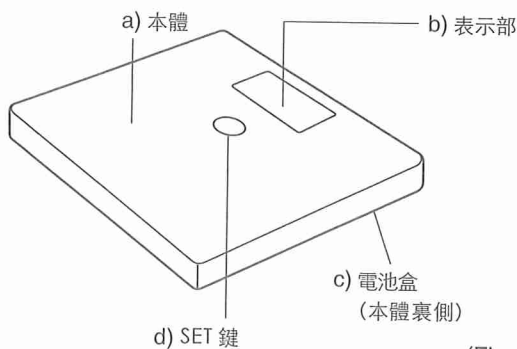

(Fig. 1)

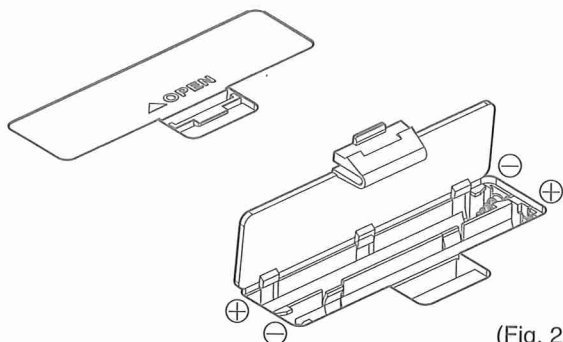

(Fig. 2)

型號	HD-383
最大秤重量	150kg
量測範圍/最小單位	0~100kg / 單位100g 100~150kg / 單位200g
電源	DC3V 單4乾電池(R03)×2
本體尺寸	D300×W320×H33.7mm/約2.2kg(含電池)
消費電流	最大20mA以下
電池壽命	約1年(1日量測5次時)

售後服務卡


姓名/	原購經銷商
購買日期/ 年 月 日	
品名/ 電子體重計	
型號/	

請務必蓋店章確保權益


- 自購買日起，壹年零件維修保固 (不包括電池)。
 - 憑此卡提出維修需求時，需一併提供本產品購買發票或證明，且保卡需加蓋購買經銷商店章，方始有效。
 - 產品發生異常時，請優先撥打服務專線詢問，以做簡易故障排除，若無法改善，請再將商品寄回公司檢查。
 - 超過保固期間，將視實際維修狀況酌收費用 (會先行報價)。
 - 請妥善保存此卡，如需任何服務事項，請出示本保卡。
- 發生以下任一狀況時，產品將不在本保卡有效保固範圍內：
1. 因自行對產品拆解、拆修、改裝或調整而造成的不良故障。
 2. 因人為不當使用，未因說明書指示使用，摔落跌落或天災/地震/水災/異常電壓/使用指定外的電源等因素引起之故障損壞。
 3. 在一般家庭外 (公共場所/營業場所等) 使用造成的故障或損壞。
 4. 保卡遺失且無法提出相關購買證明或發票。
 5. 保卡未蓋店章，購買日期記載不完全或者內容被改寫者。
 6. 使用後的外觀損傷破損，以及更換外觀零件、配件。
 7. 電池漏液、電源變壓器不在保固範圍內。
- 如需維修，請親自將產品送至購買經銷商或寄至本公司維修部。

Digital Bathroom Scale


Model HD-380/381/382/ 385/389F

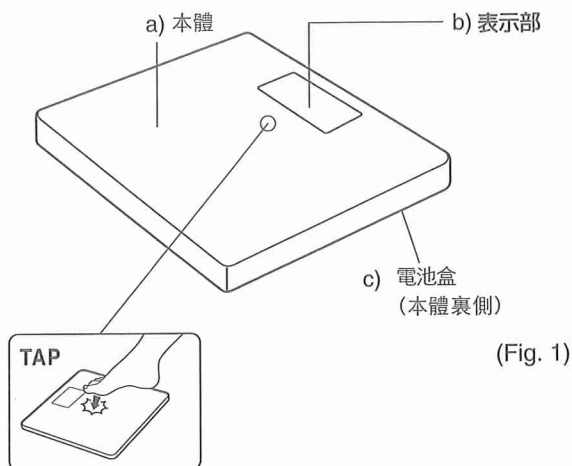

(Fig. 1)

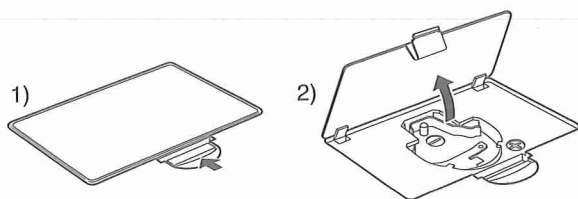

(Fig. 2)
(HD-380, 381)

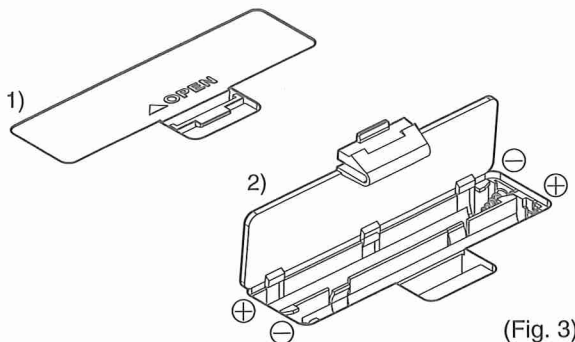

(Fig. 3)
(HD-382, 385, 389F)

型號	HD-380/381/382/385
最大秤重量	150kg
量測範圍/最小單位	0~100kg / 100g 100~150kg / 200g
電源	HD-380-381 DC3V CR2032×1 HD-382-385 DC3V 單4乾電池(R03)×2
本體尺寸	HD-380-381 D300×W320×H22mm/約1.7kg(含電池) HD-382-385 D300×W320×H24mm/約1.7kg(含電池)
電流	最大20mA以下
電池壽命	約1年(1日量測5次時)

使用說明

1. 規格

負載能力：150 千克 / 330 磅 / 23 英石 8 磅
刻度：0.1 千克 / 0.2 磅 / 1 磅
電池類型：(Fig. 2) CR2032, (Fig. 3) AAA x 2

2. 部件 (Fig. 1)

- a) 主體
- b) 顯示幕
- c) 電池(底部)

3. 使用之前

使用稱重模式開關，選擇喜歡的稱重模式。

4. 稱重

- 1) 將你的腳輕輕地踏在平台的中部，並且釋放壓力啟動體重計。
 - 2) 當顯示屏出現“0.0”時，請站在平台上，並且保持不動。
 - 3) 在幾秒鐘內您的重量將會鎖定，然後閃亮。
 - 4) 體重計在 30 秒後將自動關閉。
- 注意：如果重量超過 150 千克 / 330 磅 / 23 英石 8 磅時，液晶顯示屏將顯示“OL”(超重)，並且在 30 秒以後關閉。測量時，如果出現不規則的顯示，可以通過取出和重裝電池來重啟體重計。

5. 更換電池

當液晶屏幕上出現電池電量不足的標誌 (Lo) 時，請取出當前電池並更換新的電池，如圖 2 和 3 所示。

6. 保養說明

- 1) 請小心不要打開體重計或修改它的結構或電路。這些行為將使所有的保修承諾失效。
- 2) 請小心，不要將水或化學液體灑在體重計上。應定期用濕布擦拭清潔體重計。
- 3) 當長時間不使用時，請取出電池，避免損壞體重計。
- 4) 當使用發射頻率類的電子產品 (例如手機) 時，請不要使用這個體重計，因為這樣也許會影響您的測量結果。
- 5) 在潮濕狀態下，請不要踩踏在平台上。
- 6) 不要在平台上擺放任何物體。

維修注意事項

1. 保證書

保證書附在使用說明書內，請確認「銷售商店名、購買日期」確實填寫完整。
請詳閱保證書內容，並妥善保存。
保固期間：購買日起壹年

2. 送修時

保證期間內：請連絡昌豐國際股份有限公司服務人員，附上保證書，將商品送修至
新北市三重區重新路5段609巷10號4樓/維修部收。

保證期間外：請先連絡昌豐國際股份有限公司服務人員，在可維修狀況下，將產品送修及酌收維修費用。

感謝您購買公司產品，請妥善保存此證明，如有遺失將不重覆發給。

昌豐國際股份有限公司
SUNLUS CO., LTD.

服務專線：**02-6637-5678**

服務傳真：**02-6637-5858**

服務地址：

24159 新北市三重區重新路5段609巷10號 4F

HD3807651(0)-1910SU